

## Lihtne arstile- mugavam patsiendile

Fluoriidravi peab olema mugav. Trikaltsiumfosfaadiga (TFK) Clinpro™ White Varnishit on lihtne kasutada ja mugav peale kanda. 3M ESPE poolt loodud Clinpro White Varnishi kasutamine ei vaja keerulist hammaste eeltötlust, piisab vaid hammaste pesust hambaharjaga. Seda võib peale kanda isegi siis, kui hambapinnal esineb katuga alasid.

Lisaks pakub teisi suurepäraseid eeliseid:

- Pealekandmine võtab aega vaid mõne sekundi
- Patsient võib kohe pärast laki pealekandmist süüa ja juua
- Nähtamatu-sarnane emailtoonile
- Piparmündimaitse, magustatud ksülitooliga



# Kliiniliselt tõestatud



# Clinpro™ White Varnish trikaltsiumfosfaadiga aitab kaitsta homset naeratust

## Tellimise informatsioon



Toote Nr.	Toote informatsioon
-----------	---------------------

12249	<b>Clinpro™ White Varnish 50 pakk – Piparmündimaitsega</b> 50 ühekordset doosi blisterpakendis (0.5ml) ja aplikaatorharjad eraldi fooliumpakendis; 1 patsiendi segamisalus; 60 doseerimiskleebist; Kasutusjuhend
-------	---

12250	<b>Clinpro™ White Varnish 100 pakk – Piparmündimaitsega</b> 100 ühekordset doosi blisterpakendis (0.5ml); 100 aplikaatsioonihaarja; 2 patsiendi segamisalus; 100 doseerimiskleebist; Kasutusjuhend
-------	---

**3M ESPE**

3M Eesti OÜ  
Mustamäe tee 4, 10621, Tallinn  
tel. 6115910  
rpaas@mmm.com  
vilumae@mmm.com  
www.3M.ee

You + 3M ESPE =  
*New ideas for dentistry*

3M, ESPE ja Clinpro on  
3M või 3M ESPE AG kaubamärgid  
© 3M 2010. All rights reserved.  
01 (04.2010)

# Clinpro™ White Varnish

Trikaltsiumfosfaadiga



On hea omada natuke  
lisakaitset

**3M** ESPE


# Clinpro™ White Varnish – nüüd koos trikalsiumfosfaadiga

You + 3M ESPE =  
New ideas for dentistry


3M ESPE Clinpro™ White Varnish koos trikalsiumfosfaadiga on patenteeritud ühend, mis sisaldab fluoriidi ja kaltsiumi fosfaati – komponente, mida normaalselt leidub süljes. See eksklusiivne trikalsiumfosfaadi tehnoloogia on lisatud Clinpro White Varnishile, et tagada eesmärgipärane ja pidev fluoriidi ja kaltsiumi vabastamine.

Tootmisprotsessi käigus luuakse kaltsiumi ümber kaitsekiht, mis võimaldab kaltsiumil ja fluoriidil koos eksisteerida. Pärast laki peale kandmist voolab Clinpro White Varnish üle kogu hambapinna ning kokupuutel süljega hakkab vabastama kaltsiumi ja fluoriidi.

Eelpool kirjeldatud protsess võimaldab Clinpro White Varnishil vabastada fluoriidi ja kaltsiumi kogu laki toimeaja vältel- kuni 24 tundi!

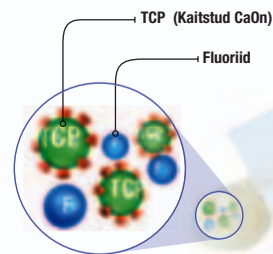

Sülg aktiveerib kaitstud kaltsiumühendi hambapinnal, põhjustades kaltsiumi vabastamise koos fluoriidiga.

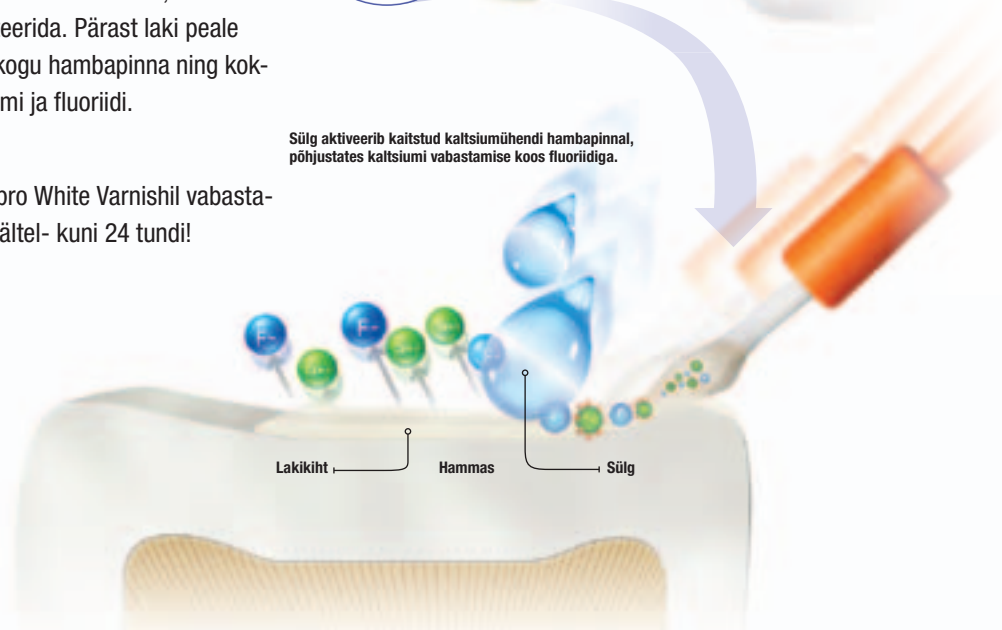

## Kiire ja kestev dentiinikanalite sulgemine.


Dentiinikanalite sulgemine hambaravikabinetis võimaldab vabastada patsiendi koheselt valuaistingust, mis on seotud vedeliku liikumisega läbi avatud kanalite. Clinpro White Varnish siseneb dentiinikanalitesse ja sulgeb need.

### Clinpro White Varnish suleb dentiinikanalid.



SEM pilt 1500X suurendusega

Clinpro™ White Varnish tungib dentiinikanalitesse ja suleb need, mille tagajärjel vabaneb patsient koheselt valuaistingust, mis on tingitud vedeliku liikumisest dentiinikanalites.

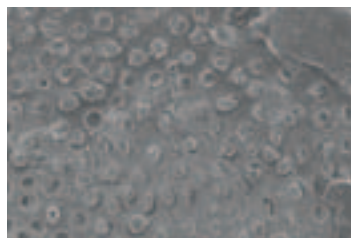

SEM pilt 1500X suurendusega

Pärast lakijäägi eemaldamist hambapinnalt, jätkab Clinpro™ White Varnish kanalite avanemise blokeerimist, pakkudes kauakestvat kaitset.

# Vähem tundlikkust


Vähesed patsiendid suudavad tuvastada MILLINE hammas põhjustab neile ebamugavustunnet.\*

Clinpro White Varnishit katab rohkem hambapindasid, pakkudes sellega erilist eelist ülitundlikkuse ravis, kus valu võib olla seotud mitmete hambapindadega, hõlmates ka interproksimaalseid pindu.

## Voolab paremini ning katab ka neid hambapindasid, mida traditsioonilised lakid ei kata.

Kuidas Clinpro White Varnish jõuab raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse? Clinpro White Varnish voolab paremini kui teised testitud lakid- ta ei kõvastu, püsib kauem voolavana, kattes isegi interproksimaalsed hambapinnad.

### Vertikaalne voolamistest

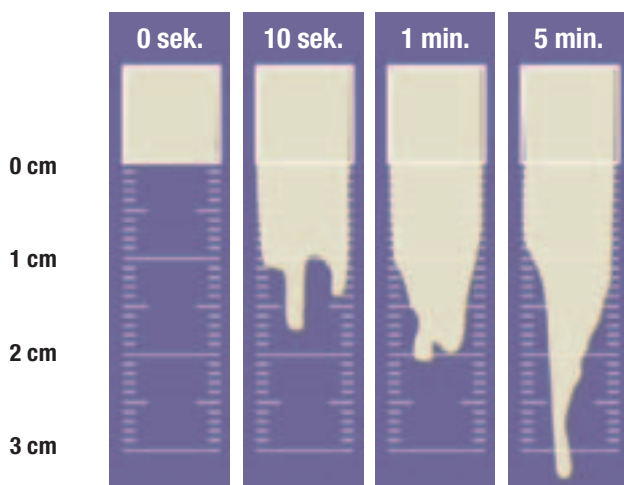


Flow measured as the vertical distance Clinpro™ White Varnish travels in the presence of water after initial application over time.

Allikas: 3M ESPE sisemised andmed

## Katab rohkem hambapindasid.

Kliinilised uuringud näitavad, et Clinpro White Varnish katab kaks korda enam hambapindu.

### In Vivo Varnish Flow Test – 1 tunni pärast

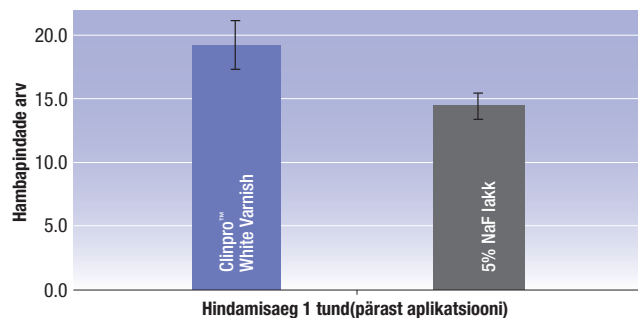


Clinpro™ White Varnish aplitseeriti 8 alumisele maksillaarpinnale in-vivo. Aplitseerimisjärgselt voolab lakk üle hammaste, tungides raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.

Allikas 3M ESPE sisemised andmed

## Rohkem fluoriidi.

Tänu heale voolamisvõimele katab lakk hambad ühtlaselt ning vabastab ka rohkem fluoriidi kui konkureerivad lakid.

### Keskmine fluoriidi kontsentratsioon 1 tunni pärast

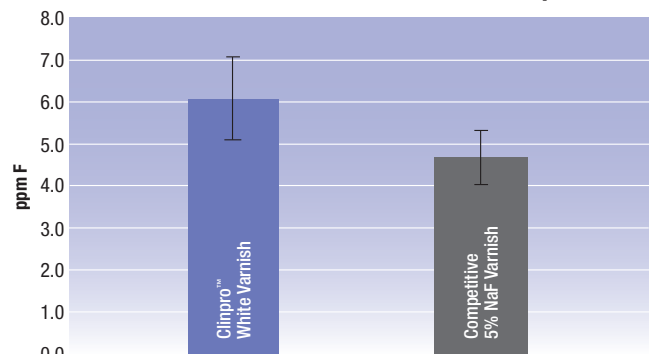


Kliiniline test näitab, et Clinpro™ White Varnish võimaldab kõrgemat keskmist sütle fluoriidisisaldustaset

Allikas: 3M ESPE sisemised andmed

## Vabastab kaltsiumi.

Fluoriidi ja kaltsiumi sisaldavad tooted on loodud selliselt, et nad aitavad suurendada kaltsiumfluoriidi moodustumist hambapinnal, sealhulgas ka dentiinkanalites, aidates sellega vähendada ülitundlikkust.

### Kumulatiivne kaltsiumi vabastamine

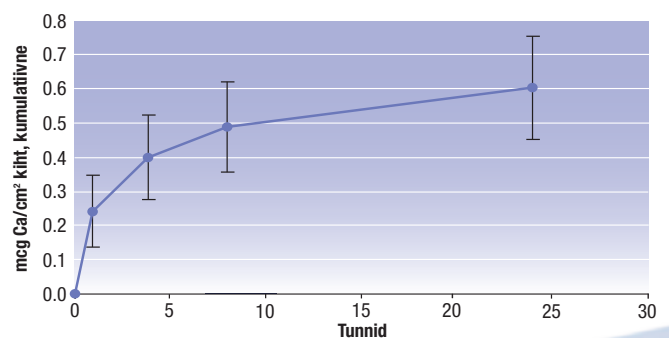

Pärast pealekandmist, Clinpro™ White Varnish jätkab kaltsiumioonide vabastamist vähemalt 24 tunni jooksul.

Allikas: 3M ESPE sisemised andmed.






# Clinpro™ White Varnishi aplitseerimine on lihtne ja võtab aega vaid mõne sekundi

Kanna vaid harjaga õhuke lakikiht kogu hambapinnale- ja Clinpro White Varnish teeb ülejäänu.


- Lakk ei vaja kuivatamist
- Suurepärased voolamisomadused võimaldavad Clinpro White Varnish lakil jõuda ka interproksimaalsetele pindadele, kuhu teised lakid ei pruugi jõuda
- Katab ja kinnitub aplitseeritud pindadele



1 Ravitavad pinnad peaksid olema "hambaharja-pesu" puhtad. Lakk võib aplitseerida ka katu olemasolu korral.

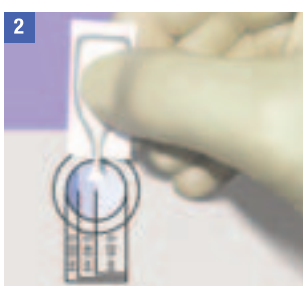

2 Ava Clinpro™ White Varnish pakend ja sega.

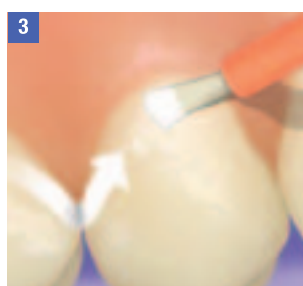

3 Kanna Clinpro™ White Varnish õhukese kihina horisontaalsete liigutustega hammastele.

Pärast laki pealekandmist paluge patsiendil sulgeda suu. Ärge kasutage imurit. Palun järgige kasutusjuhendit täpsema informatsiooni saamiseks, aga ka hoiatuste ja garantii kohta informatsiooni saamiseks.

## Parem kaitse

## Kaitse, mis on nähtamatu.

Clinpro White Varnish on hammastel praktiliselt nähtamatu, kuid jätab siiski hammastele ajutiselt õhukese kihi, et patsient teaks-see toimib.



Koheselt peale Clinpro™ White Varnish aplitseerimist



## Eelised

- Sisaldab kaltsiumit ja fosfaati
- 5 aastat kliinilist edu
- Sisaldab 22,600 ppm fluoriidi
- Katab rohkem hambapindasid.
- Vabastab kaltsiumit
- Kerge peale kanda
- Vähendab ülitundlikkust